

# Cavity

キャビティ

6本のバーでキャビティアクセスに対応



CA **V** ITY ACCESS SET



CA **V** ITY ACCESS Z SET

# 製品特長

## 特徴 1

### SIMPLE シンプル

この一つのセットで殆どのキャビティ アクセスに対応。

## 特徴 2

### COMPACT コンパクト

折りたたみ式の専用スタンドに最低限必要な6本の器具を入れ、コンパクトに収納。

## 特徴 3

### CLEAN クリーン

オートクレーブ対応の専用スタンドにより、より衛生的な管理が可能。(耐熱135℃)

#### 天然歯の形成には…

カーバイドバーラウンド25mmFGを使用。ロングシャンクの為、タービンヘッドが隣在歯に接触しにくく、また術野が、大きく取れます。



カーバイドバーラウンド25mmFG




#### メタルの除去には…

カーバイドパトランスメタルFGを使用。切削効率に優れたメタル除去専用バーの為、メタル除去の時間を短縮できます。



カーバイドパトランスメタルFG

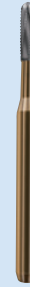

#### セラミッククラウン等の除去には…

ダイヤモンドバーラウンドFGを使用。高品質なバーの為、振動が少なく、歯質への負荷を軽減します。



ダイヤモンドバーラウンドFG



#### 髄室開拡には…

ダイヤモンドバーコニカルFG使用。高品質なバーの為、振動が少なく、歯質への負荷を軽減します。



ダイヤモンドバーコニカルFG (アクセスセット)



#### 髄室開拡には…

エンドゼックリヤを使用。先端部に刃が無く、穿孔の危険性が減少します。



エンドゼックリヤ (アクセスZセット)



#### 根管口形成には…

Xゲーツを使用。1本でゲーツ#1～#4の働きをする画期的なゲーツドリルで、エンド三角除去の時間を短縮できます。



Xゲーツ



# 製品仕様

A030500000000

## キャビティ アクセスセット

### 内容

- ・メルファー ダイヤモンドバーラウンドFG016
- ・メルファー ダイヤモンドバーコニカルFG016
- ・メルファー カーバイドパトランスメタルシリンダーFG012
- ・メルファー カーバイドバーラウンド25mmFG#2
- ・メルファー カーバイドバーラウンド25mmFG#4
- ・Xゲーツ

各1本入り

専用スタンド、イメージミニCD(英語版)付



価格: ¥12,740

A305Z00000000

## キャビティ アクセスZセット

### 内容

- ・メルファー ダイヤモンドバーラウンドFG016
- ・メルファー カーバイドパトランスメタルシリンダーFG012
- ・メルファー カーバイドバーラウンド25mmFG#2
- ・メルファー カーバイドバーラウンド25mmFG#4
- ・エンドゼックリヤ 25mmFG
- ・Xゲーツ

各1本入り

専用スタンド、イメージミニCD(英語版)付



価格: ¥12,740

販売名: キャビティ 一般的名称: 歯科用根管口拡大ドリル 医療機器承認番号: 21900BZX00054000 クラス分類: クラスII (管理医療機器)

表示価格は、2023年7月現在の標準価格で消費税は含まれません。\*仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用途は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社/〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5階

カスタマーサービス

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

☎ 0120-461-868 FAX: 0120-120-659

[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)