

ProGlider®

プログライダー

1本のファイルでグライドパス形成



製品特長

・1本のファイルでシンプルな操作

マルチプルテーパの採用により、1本のファイルでグライドパス形成が可能。

・根管追従性が向上


M-ワイヤーの採用により、根管追従性が向上。

・湾曲根管にも適応

柔軟性の向上により、湾曲根管への対応が実現。

・1F-1P (シングルペーシェントユーズ)

滅菌包装“1人の患者さんに1本”により、感染リスクを低減した患者さんにやさしい根管治療の実現。

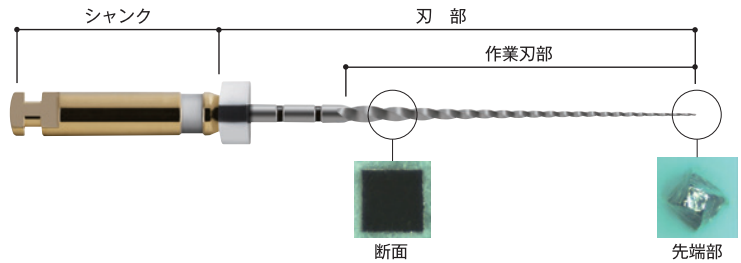

サイズ

先端径	テーパ (%)	刃部 (mm)	作業刃部 (mm)	シャック (mm)
#16	2-8.5	21/25/31	18	11



使用手順

GLIDE PATH

K ファイル #10

K ファイル #10 で穿通

↓

プログライダー

300rpm 2Ncm にて使用

SHAPING

ウェーブ・ワン ゴールド

プライマリー

プロテーパー・ネクスト

X1
X2

OPTIONAL

スモール

ミディアム

ラージ

OPTIONAL

X3

X4

X5

製品仕様

製品番号	製品名	サイズ	包装単位	標準価格
A092322100103	プログライダー	21mm	3本	¥7,240
A092322500103		25mm	3本	¥7,240
A092323100103		31mm	3本	¥7,240

関連製品

製品名	内容
ウェーブ・ワン ゴールド	種類 (スモール, プライマリー, ミディアム, ラージ)、長さ (21, 25, 31mm)、各 3 本入り、アソート 4 本入り
プロテーパー・ネクスト	種類 (X1, X2, X3, X4, X5)、長さ (21, 25, 31mm)、各 6 本入り
X-スマート プラス	コントロールユニット、モーターハンドピース コントラングル (ギア比 6:1) 他

・製品名: プログライダー 一般名称: 電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号: 226AGBZX00011000 クラス分類: クラスⅡ (管理医療機器)
 ・製品名: ウェーブ・ワン ゴールド 一般名称: 電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号: 227AGBZX00033000 クラス分類: クラスⅡ (管理医療機器)
 ・製品名: プロテーパー・ネクスト 一般名称: 電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号: 225AKBZX00158000 クラス分類: クラスⅡ (管理医療機器)
 ・製品名: X-スマート プラス 一般名称: 歯科用根管拡大装置 医療機器認証番号: 224AKBZX00131000 クラス分類: クラスⅡ (管理医療機器・特定保守管理医療機器)

表示価格は、2023年7月現在の標準価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社 / 〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5階

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)

☎ 0120-461-868 FAX: 0120-120-659

www.dentsplysirona.com