

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY




The tip top programm for ultrasonic handpieces

Tips for every purpose,
quality in every detail

超音波スケーラー&専用チップ

dentsplysirona.com

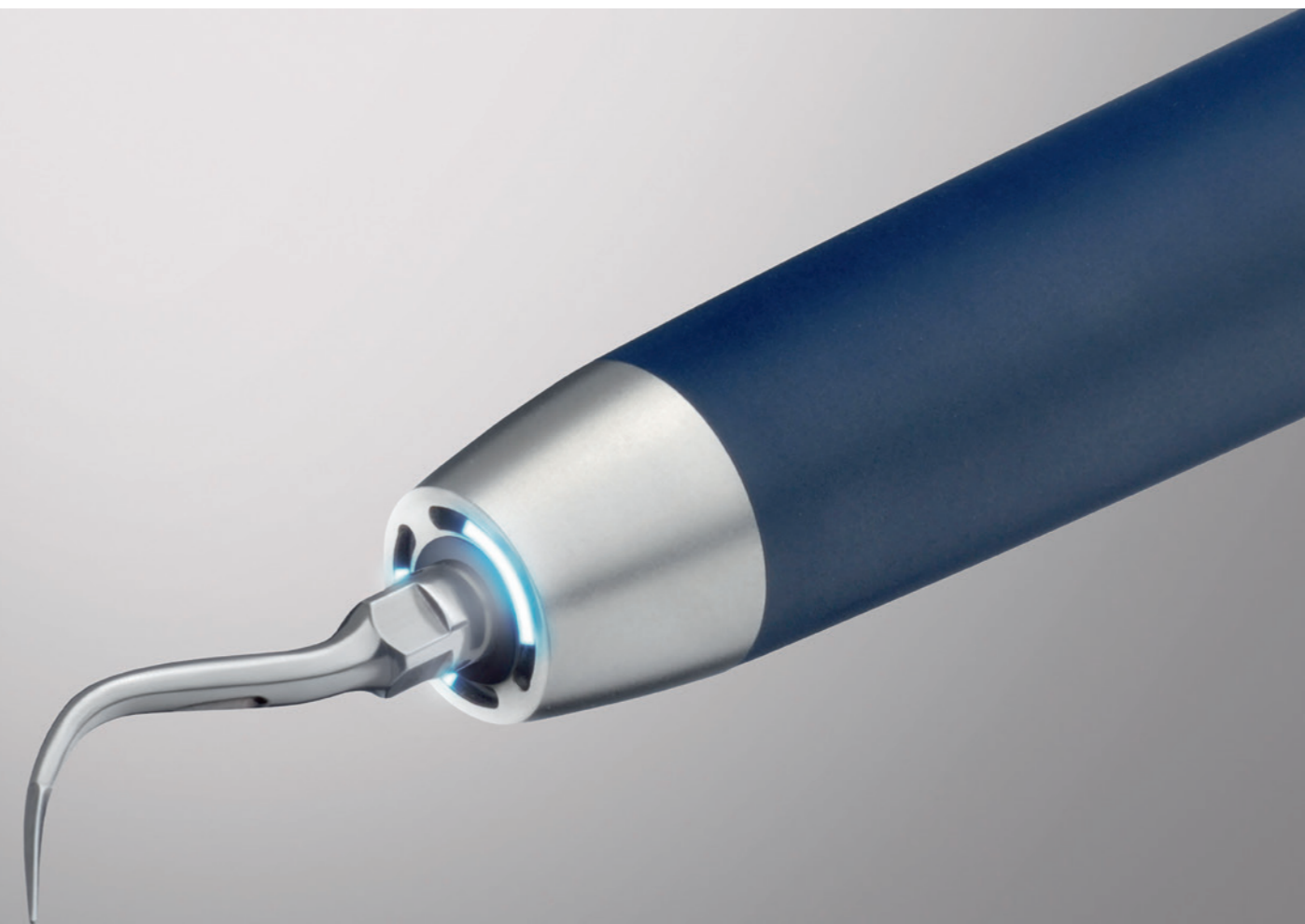

一般的名称:超音波歯周用スケーラ 販売名:シロニック 医療機器認証番号:223AABZ100013000 分類:管理医療機器 特定保守管理医療機器
一般的名称:歯科用オプション追加型ユニット 販売名:シロナトリートメントセンター C2* 医療機器承認番号:21800BZY10226000 分類:管理医療機器 特定保守管理医療機器

製造販売元
デンツプライシロナ株式会社
www.dentsplysirona.com

■各ショールーム

■札幌	Tel: 011-709-5800	■静岡	岡	Tel: 054-653-2711
■盛岡	Tel: 019-604-2340	■名古屋	屋	Tel: 052-251-8467
■仙台	Tel: 022-266-4020	■大阪	阪	Tel: 06-6243-6636
■埼玉	Tel: 048-799-2931	■広島	島	Tel: 082-546-2301
■東京・銀座	Tel: 03-5148-7895	■福岡	岡	Tel: 092-518-1800
■横浜	Tel: 045-440-1521			

※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

BI 1007PD

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY




High-quality tips and ultrasonic scalers

首尾一貫した高品質を誇るデンツプライシロナの超音波スケーラーと専用チップ。

この2つのコンビネーションは、理想的な治療結果を実現します。

ワイドな適応性と優れた使い勝手が定評の超音波スケーラーと、治療部位に特化してデザインされたチップの組み合わせは治療の質を高めます。

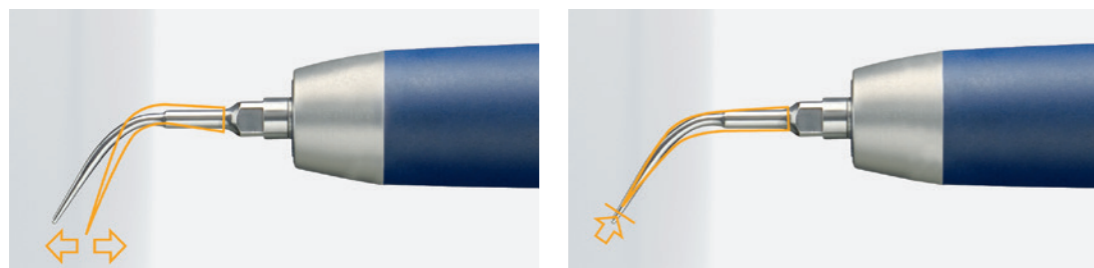

前後および上下の2次元振動は、安全かつ効果的な治療を可能とします。

シロソニック/L/TL — 優れた多目的性: 治療内容に応じて幅広く対応


シロソニック、シロソニックL、およびシロソニックTLは、現代の歯科診療の多岐に渡る治療に優れた有用性を発揮します。各スケーラーの確実なパワー調整機能は、繊細なペリオ治療から隣接面の小窩洞形成(マイクロプレパレーション)まで幅広い治療を可能とします。また、根管治療時に用いた薬剤の洗浄用途として、外部供給スプレーアダプターもオプションにてご用意しています。

安全性

各チップへ与えられる適正な振動可動域は、部位に応じた理想的な治療を実現します。例えば、スケーリング用とペリオ治療用チップは、前後および上下の2次元振動により、治療中の歯牙へ穏やかに対応します。側方運動を回避することにより、安全で効果的な治療を可能とします。また、スケーリングの効果は、チップの摩耗に大きく左右されます。チップが短くなるほど、研磨力と歯石の検出性能が低下するからです。1ミリの摩耗で約25%、2ミリでは約50%の能力低下が見られます。チェックカード(別売)にて随時チップの長さをチェックしてください。

さまざまな治療に 幅広く対応する専用チップ

- スケーリング用
- ペリオ治療用
- 根管治療用
- 根尖部治療用
- 小窩洞形成用
- 充填物圧接用

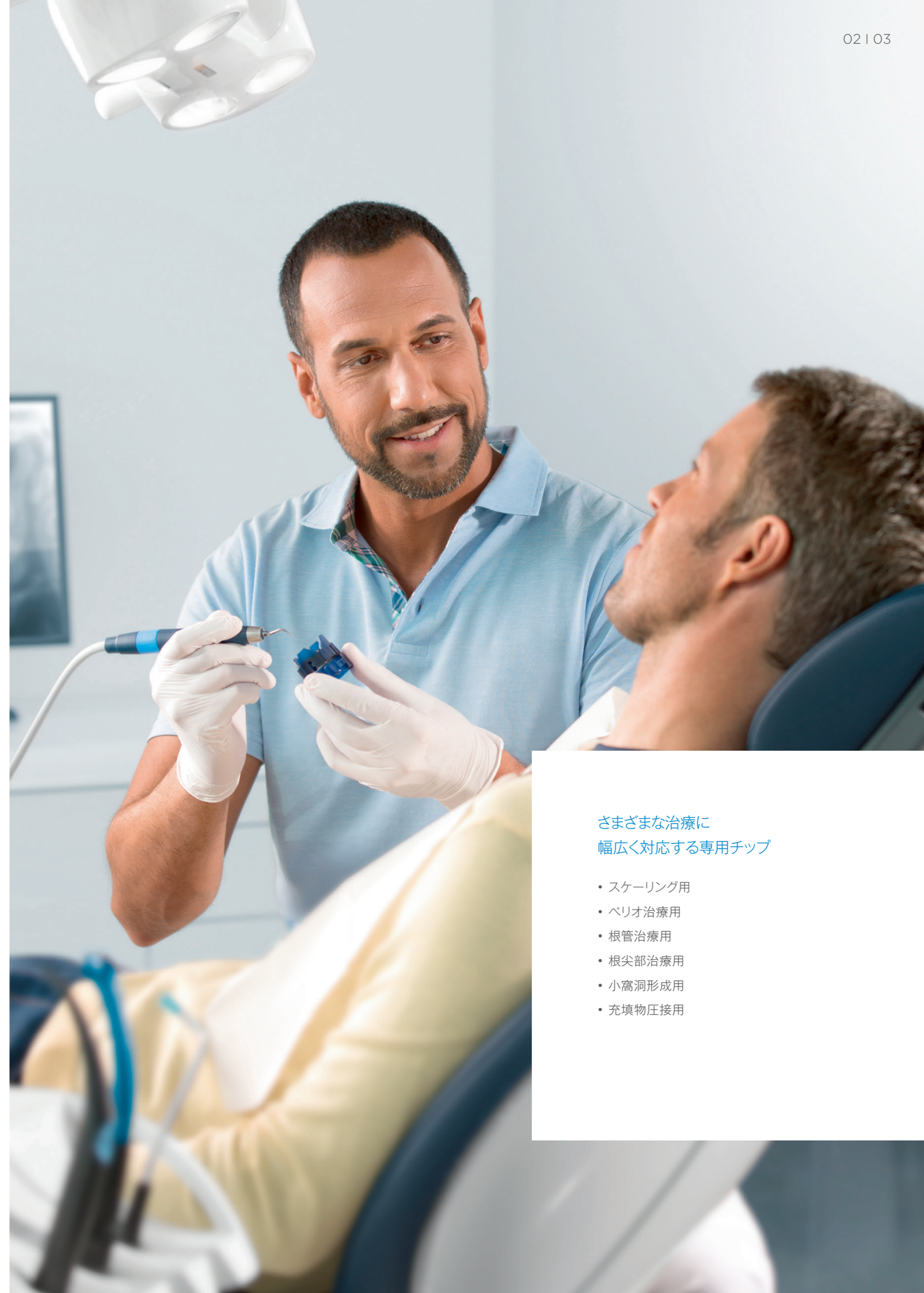

治療効果をもつめる高品質チップ



優れた互換性

専用チップの多くは、デンツプライシロナ製のあらゆる超音波スケーラーにてお使い頂けます。シロソンス、シロソンスL、シロソニック、シロソニックL、シロソニックTLなど、歴代のスケーラー間での互換性を最大限考慮しています。

高品質

全ての専用チップは、デンツプライシロナならではの焼き戻し処理により硬化調整されたステンレススチールのみで製造されます。また、最新の製造技術を継続的に導入することにより、常に高い品質基準を設け製品に反映しています。

超音波スケーラー

製品名		内容	製品番号
シロソニック L ^{※1}		ライト付、No.3L及びNo.4Lチップ付属	59 13 509
シロソニック TL ^{※2}		ライト付、No.3L及びNo.4Lチップ付属	62 12 216

※1 INTEGO用

※2 SINIUS、TENE0用

スケーラー用アクセサリ

製品名		用途	製品番号
外部注水用アダプターL		生理食塩水等の外部供給用。 対応スケーラー： シロソンスL、シロソニック、 シロソニックL	60 02 286
外部注水用アダプターTL		生理食塩水等の外部供給用。 対応スケーラー： シロソニックTL	61 41 852
トルクレンチ		専用チップ着脱用レンチ	60 06 196
チェックカード		No.1L~4L、および シロペリオPE1の 先端長測定用カード	54 55 667

テクニカルデータ

スケーラー	テクニカルデータ	シロソニックL シロソニックTL
振動子タイプ		圧電タイプ
振動		リニア(直線)
発信周波数 [kHz]		25~32
ライト [*]		LED
最大径 [mm]		約19.5
全長(チップ未装着時)		約96.4
重量[g]		約49



「シロペリオ」－ペリオ治療用

歯肉縁下のバイオフィルム破壊および洗浄用。分岐部を含むあらゆる歯根部へのアクセスが容易。歯石除去後の定期健診や日常のメンテナンスに有用です。トルクレンチ付。



製品名称		特徴と用途	製品番号
シロペリオ PE1		ストレート。歯周ポケットの洗浄、歯根部の清掃	60 44 825
シロペリオ PE2		右カーブ(細さはストレートと同一)。臼歯の歯周ポケット洗浄、歯根部の清掃	60 44 833
シロペリオ PE3		左カーブ(細さはストレートと同一)。臼歯の歯周ポケット洗浄、歯根部の清掃	60 44 841
シロペリオ セット		セット内容：シロペリオPE1~PE3 各1、トルクレンチ	59 50 246

※対応スケーラー：シロソソS/C8/L、シロソニックL/TL

「No.5チップ」－根管治療用

根管治療時に用いた薬剤の洗浄用。超音波の振動により根管内のリンス効果を高めます。(根管拡大を目的とするものではありません)



製品名称		特徴と用途	製品番号
根管治療チップ No.5 (チップ単体、 ファイルは未梱包)		根管内の残留薬剤洗浄(ライト付超音波スケーラーにて使用)。ファイルは、EMS社製ESIファイル(発売元:株式会社松風)を推奨します。	60 02 310

※対応スケーラー：シロソソL、シロソニックL/TL

「No.6Lチップ」－充填物圧接用

超音波振動により充填物の圧着を確実にします。



製品名称		特徴と用途	製品番号
CEMセット No6L		揺変性レジンセメントによりセラミックインレー(セレック等)の圧接に有用。セット内容：No.6チップ(1本)、インレー用コンタクトキャップ(2個)	18 94 307
コンタクトキャップ		インレー用コンタクトキャップ(10個)	18 94 372

※対応スケーラー：シロソソS/C8/L、シロソニックL/TL

「シロブレップ」－小窩洞形成用

傾斜20度のチップ切端にダイヤモンド粒子をコーティング。「隣接面の小窩洞形成」や「接着性インレーとアンレーの形成仕上げ」等のマイクロプレパレーションに最適。トルクレンチ付。



製品名称		特徴と用途	製品番号
シロブレップ M1		近心用、先端小	59 04 276
シロブレップ M2		近心用、先端標準	59 47 358
シロブレップ D1		遠心用、先端小	59 47 309
シロブレップ D2		遠心用、先端標準	59 47 366
シロブレップ セット		セット内容：M1、M2、D1、D2 各1、トルクレンチ付	59 50 253

※対応スケーラー：シロソソS/C8/L、シロソニックL/TL

「シロレトロ」－根尖部治療用

ダイヤモンド粒子をコーティングした先端部をほぼ直角に曲げ、さらに左または右に20度のひねりを加えました。根尖切除した根管の清掃に有用。トルクレンチ付。



製品名称		特徴と用途	製品番号
シロレトロ KR		ショートタイプ、右カーブ 下顎左側及び上顎右側	54 57 895
シロレトロ KL		ショートタイプ、左カーブ 下顎右側及び上顎左側	54 57 887
シロレトロ GR		ロングタイプ、右カーブ 下顎左側及び上顎右側	54 57 911
シロレトロ GL		ロングタイプ、左カーブ 下顎右側及び上顎左側	54 57 903
シロレトロ セット		セット内容：KR、KL、GR、GL 各1、トルクレンチ付	54 57 929

※対応スケーラー：シロソソS/C8/L、シロソニックL/TL

スケーリング用

歯肉縁上の幅広いスケーリング用。トルクレンチ付。



製品名称		特徴と用途	製品番号
No.1 L		先端横方向に平面 頬側及び舌側	89 24 250
No.2 L		先端縦方向に平面 頬側、舌側及び隣接面	89 24 268
No.3 L		両側用応用全般 歯頸部及び歯間部	18 94 455
No.4 L		広範な応用範囲。 特に歯間及び歯肉縁上/下の歯面用	18 94 463

※対応スケーラー：シロソソS/C8/L、シロソニックL/TL

シロナ超音波スケーラー専用チップ

