

+
WE
KNOW
ENDO.

WaveOne® Gold

En komplett lösning för
säker och enkel endodonti

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Ett komplett reciprokerande system

Produkterna inom WaveOne® Gold-familjen erbjuder en helhetslösning för en trygg och säker endodontibehandling.

Vikten av korrekt reciprokerande rörelse

Motor

Både vinkel, acceleration och hastighet är av stor vikt för att säkerställa en optimal reciprokerande rörelse för WaveOne® Gold samt även för roterande system.



X-Smart® Plus

Motor med både reciprokerande och roterande rörelse med 9 förinställda och 2 öppna program.



Certifierad rörelse för WaveOne® Gold



WaveOne® Gold

Med WaveOne® Gold Glider optimerar du din glidbana innan rensning med WaveOne® Gold

Glidepath

WaveOne® Gold rensningsfilars finns tillgängliga i fyra storlekar och tre längder för att täcka majoriteten av dina kliniska situationer

Rensning

Papperspoints, Conform Fit™ guttaperka och GuttaCore® guttaperka på bärare, specifikt anpassade till respektive WaveOne® Gold-fil

Obturation


Dentsply Sirona
Restorative Produkter

Läs mer om våra
restorativeprodukter på:
www.dentsplysirona.com

Säkert – reciprokerande rörelse reducerar risk för filfraktur

WaveOne® Gold filsystem är säkert att arbeta med tack vare den specifika reciprokerande rörelsen. Reciprokerande betyder att filen växelvis alternerar mellan bakåt- och framåtrotation vilket gör att filen successivt arbetar sig ner i kanalen med bibehållen respekt för kanalens anatomi.

Rörelsen leder till en minskad risk för fastlåsning och minskad risk för filfraktur vilket ger en ökad patientsäkerhet.

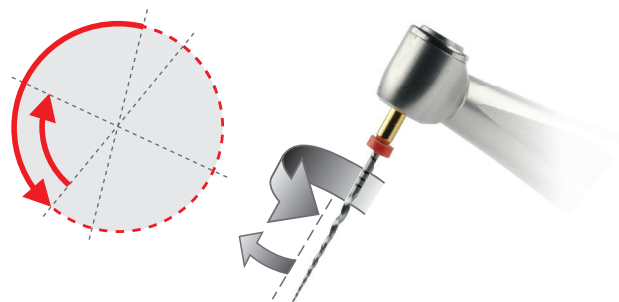

Enkelt – endast en fil per behandling

Samtliga filar i WaveOne® Gold sortimentet har variabel taper för optimal effektivitet. Den reciprokerande rörelsen i kombination med filens unika design gör att de flesta kanaler kan rensas med endast en fil i storleken Primary.

WaveOne® Gold-familjen består nu också av en reciprokerande glidepath fil vilket förenklar behandlingen ytterligare.

WaveOne® Gold Glider



015 0.2

WaveOne® Gold



020 0.7 Storlek Small



025 0.7 Storlek Primary



035 0.6 Storlek Medium



045 0.5 Storlek Large

Färgmarkering enligt ISO standard.

Procedur

- Definiera arbetslängd och skapa glidepath
- Rensa kanalen genom att låta filen arbeta 3 gånger upp och ner – filen skall alltid vara i rörelse
- Avbryt för att rengöra filen samt spola kanalen rikligt
- Upprepa till fullt rensdjup

Hygieniskt – alltid en ny fil för varje patient

WaveOne® Gold filarna är presteriliserade och förpackade i blister, färdiga att använda. Filen är avsedd för engångsbruk. Att använda sina endodontiska filar som engångsprodukt ger många fördelar:

- Minskad risk för filfraktur
- Ingen risk för korskontaminering
- Alltid en ny effektiv fil



Tidsbesparande – förenklad hantering

Med WaveOne® Gold finns inget behov av att:


- Byta fil under behandlingen
- Rengöra och autoklavera filar
- Kontrollera hur många gånger en fil är använd
- Organisera filar i filställ

I tillägg erbjuder WaveOne® Gold systemet guttaperka med variabel taper, tillverkad för optimal passform i kanalen och anpassad efter respektive filstorlek.

Guldteknologi – ökar filens flexibilitet

WaveOne® Gold är tillverkad av specialbehandlad nickeltitan som genom värmebehandling fått sin guldliknande färg samt flexibla egenskaper, vilket ger:

- Ökad säkerhet då risken för metallutmattning och filfraktur reduceras
- Möjlighet att behandla utmanande kanaler med kraftig kurvation
- Förkortad arbetstid

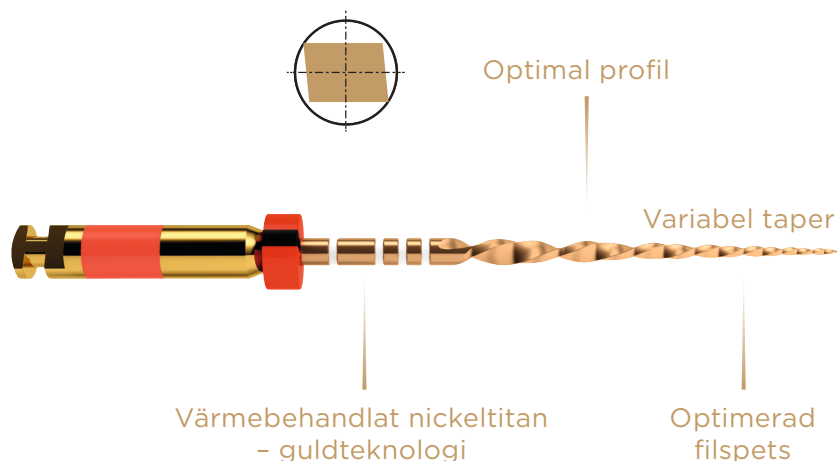


En ny standard för guttaperkaspetsar


Conform Fit™ Guttaperkaspetsar

WaveOne® Gold Conform Fit Guttaperkaspetsar är latexfria och tillverkade med hög precision för bästa möjliga passform till WaveOne® Gold filsystem.

- Variabel taper
- Exakt utförande och optimal apikal passform
- Värmeledningsförmåga upp till 5mm (vid användning av varmflytande teknik)
- Del av en systembaserad lösning

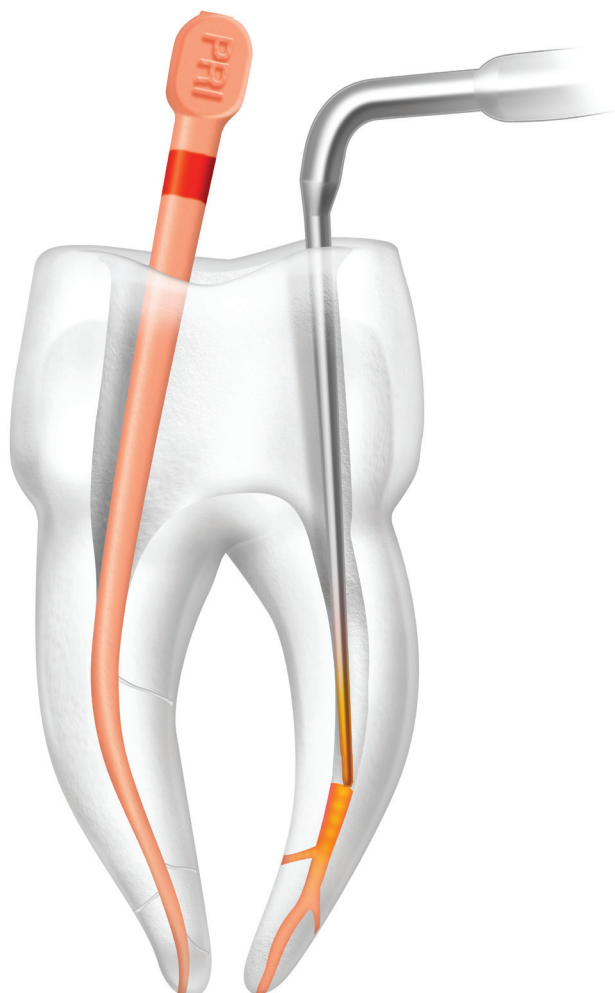

Överlägsen apikal passform*

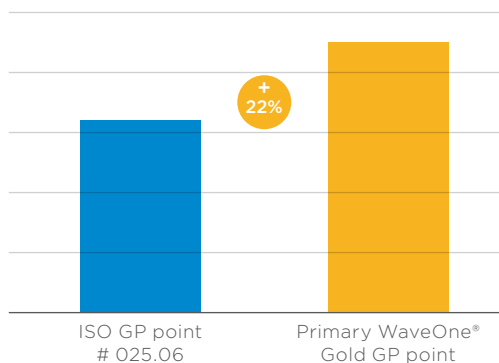

*interna laboratorietestresultat

Guttaperka på bärare för varm teknik

GuttaCore® för WaveOne® Gold

GuttaCore® Guttaperka på bärare består av en inre kärna med tvärbunden guttaperka som har ett yttre lager av vanlig guttaperka. GuttaCore värms upp i en ugn för att sedan flyta ut i sidokanaler vid applicering.

- Varmflytande teknik används för att uppnå en mer komplett obturation av kanalsystemet.
- GuttaCore kan nå ut i sidokanaler där traditionella guttaperka inte kommer åt.
- Används tillsammans med ThermaPrep® 2 ugn.



Papperspoints

- Sterilförpackade papperspoints i blister om 5st, färdiga att använda
- Färgkodade för enkel identifikation som del av en helhetslösning



En komplett lösning

WaveOne® Gold Glider – Reciprokerande glidepath fil



Glider – 015, 02 variabel taper

6 x	21 mm	B ST WIGG 621 015
6 x	25 mm	B ST WIGG 625 015
6 x	31 mm	B ST WIGG 631 015

WaveOne® Gold – Reciprokerande fil för rensning



Small – 020, 07 variabel taper

6 x	21 mm	A 0756 221 G0S 03
6 x	25 mm	A 0756 225 G0S 03
6 x	31 mm	A 0756 231 G0S 03



Primary – 025, 07 variabel taper

6 x	21 mm	A 0756 221 G0P 03
6 x	25 mm	A 0756 225 G0P 03
6 x	31 mm	A 0756 231 G0P 03




Medium – 035, 06 variabel taper

6 x	21 mm	A 0756 221 G0M 03
6 x	25 mm	A 0756 225 G0M 03
6 x	31 mm	A 0756 231 G0M 03



Large – 045, 05 variabel taper

6 x	21 mm	A 0756 221 G0L 03
6 x	25 mm	A 0756 225 G0L 03
6 x	31 mm	A 0756 231 G0L 03

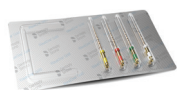

Sortiment, mixade storlekar 1 x Small/Primary/Medium/Large

4 x	21 mm	A 0754 221 G9A 03
4 x	25 mm	A 0754 225 G9A 03
4 x	31 mm	A 0754 231 G9A 03


WaveOne® Gold Papperspoints



Sterila papperspoints, box om 180 st

Small	A 175W 000 00S 03
Primary	A 175W 000 00P 03
Medium	A 175W 000 00M 03
Large	A 175W 000 00L 03

WaveOne® Gold Conform Fit Guttaperkaspetsar

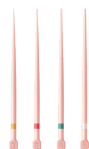

Guttaperka med variabel taper, box om 60 st

Small	B 00W GGP F00 SML
Primary	B 00W GGP F00 PRI
Medium	B 00W GGP F00 MED
Large	B 00W GGP F00 LRG
Assortment	B 00W GGP F00 AST

Starterkit med motor



X-SMART® Plus Starter Kit B00XSPSW1GKIT

1 motor med vinkelstycke
15 st Primary WaveOne® Gold filar, 25 mm
16 st mixade storlekar WaveOne® Gold filar, 25 mm
3 st WaveOne Gold Glider glide-path fil, 25 mm

GuttaCore® för WaveOne® Gold



Blister om 5 st obturatorer + 1 verifierare

Small	B NS GCWG 500 SML
Primary	B NS GCWG 500 PRI
Medium	B NS GCWG 500 MED
Large	B NS GCWG 500 LRG

Box om 25 st + 5 verifierare (5 blister)

Small	B NS GCWG C00 SML
Primary	B NS GCWG C00 PRI
Medium	B NS GCWG C00 MED
Large	B NS GCWG C00 LRG

ThermaPrep® 2 ugn



ThermaPrep® 2 A 0176 230 002 00

Gutta-Smart™ för varmflytande/3D-teknik



Gutta-Smart Starter Kit B 00GS IQ000 KIT

För lokal kontakt, vänligen besök:
www.dentsplysirona.com