

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Sinius

Эффективность в деталях

www.dentsplysirona.com | www.sirona.ru





Высокая эффективность вашей КЛИНИКИ

Время – одно из наших самых ценных активов, и хорошо, что у нас есть Sinius, эффективные решения которого позволяют вам оптимально использовать ваше время. Стоматологическая установка Sinius не только ультракомпактна, но и выгодна с точки зрения эффективного использования времени и гибкости рабочего процесса, что обеспечивается интуитивной работой с новейшим сенсорным экраном и многочисленными интегрированными функциями.



 Dentsply
Sirona

Больше гибкости благодаря плавному рабочему процессу

Стоматологическая установка Sinius сделает ваш рабочий процесс еще более эффективным. Благодаря встроенным функциям, дружественному интерфейсу EasyTouch и оптимальному использованию пространства клиники, Sinius позволяет проводить лечение всего за несколько простых этапов, что существенно экономит ваше время.

Эффективно

- Интегрированные функции имплантологии и эндодонтии.
- Интегрированная функция гигиены.
- Уникальное соотношение цены и производительности.

Интуитивно

- Дружественный интерфейс EasyTouch.
- Три концепции лечения, из которых вы сможете выбрать наиболее соответствующий вашему стилю работы.

Компактно

- Оптимальное использование пространства.
- Уникальная система подъема кресла.
- Гибкое расположение модулей врача и ассистента.



Sinius TS с нижней подачей инструментов

- Эргономичное позиционирование с независимо перемещаемыми модулем врача и поддоном.
- Функциональная система с гибким расположением съемного поддона.
- Большое свободное пространство на модуле врача и поддоне.



Идеально соответствует вашему собственному стилю работы

Три концепции лечения делают Sinius от Dentsply Sirona правильным выбором для любого стиля работы.

Sinius – перемещение модуля врача параллельно креслу пациента

- Уникальная эргономичная концепция лечения.
- Легкое перемещение модуля врача параллельно креслу пациента.
- Все под рукой благодаря функциональному поворотному модулю врача.




Sinius CS – верхняя подача инструментов

- Модуль врача поворачивается на 240° для оптимального расположения.
- Максимальное расстояние движения инструментов составляет 90 см.
- Идеальна для проведения любого лечения, независимо от того, работаете вы один или с ассистентом.



Больше эргономики для отличных результатов

Программа эргономики Dentsply Sirona – результат многолетнего опыта и исследований в этой области и характеризуется целостным видением взаимосвязи между эргономикой и ежедневным рабочим процессом. Являясь многолетним лидером в области инноваций и применения комплексных решений в стоматологии, мы продолжаем развивать эту программу.

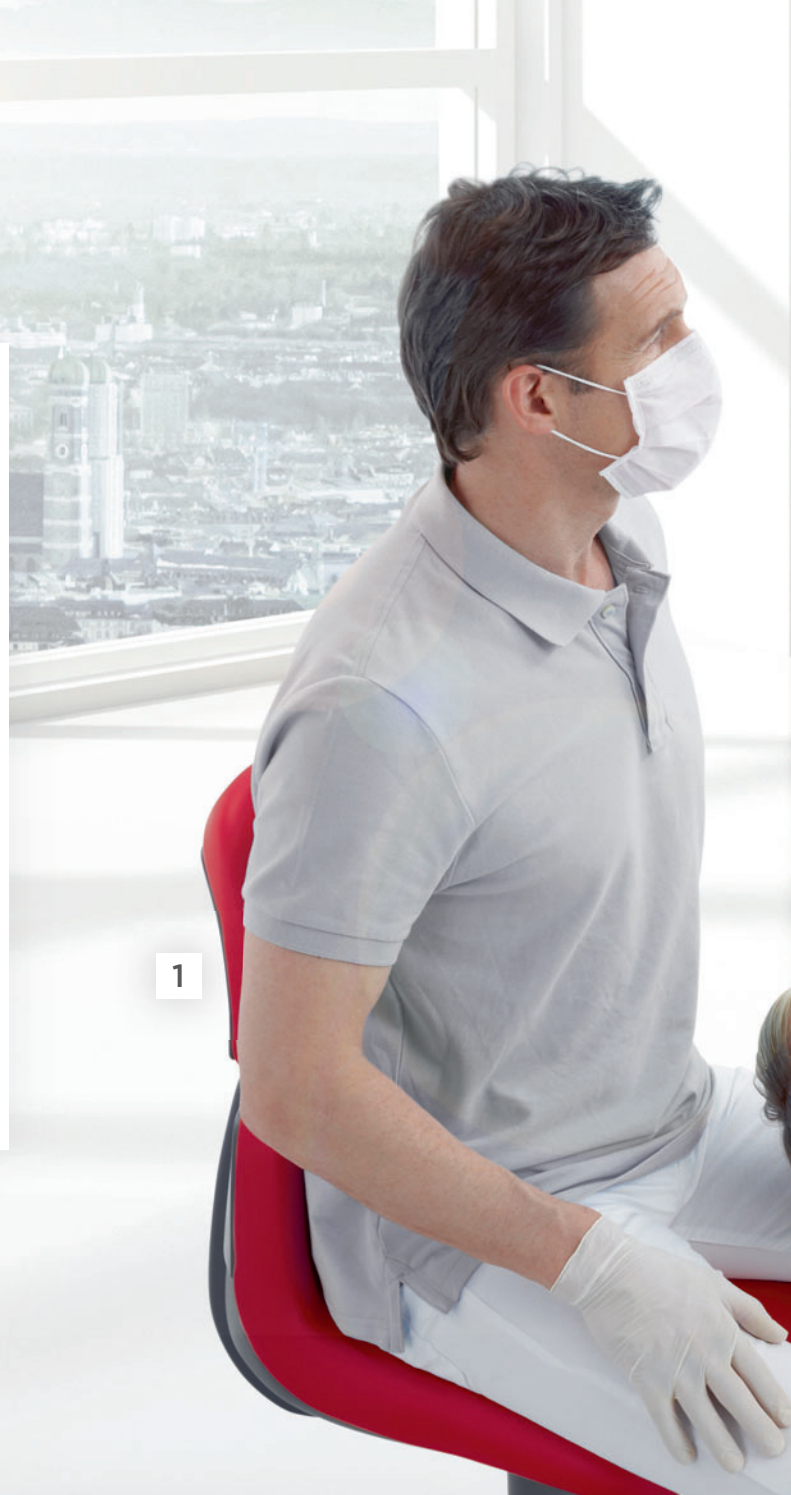

1

Удобное положение врача

- **Больше свободы движений**
Беспроводная педаль, перемещение модуля врача параллельно креслу пациента, поворотный кронштейн или поворотный поддон.
- **Оптимизированный доступ к инструментам**
Отличная координация и гибкое позиционирование модулей врача и ассистента, независимое позиционирование поддона на установке с нижней/верхней подачей инструментов.
- **Удобные рабочие стулья**
Hugo, Carl.

2

Удобное позиционирование пациента

- **Легкая регулировка**
Гибкая регулировка высоты кресла с сохранением оптимальной высоты рабочей области.
- **Идеальная поддержка позвоночника**
ErgoMotion и функция поясничной опоры.
- **Высокий уровень комфорта пациента**
Система плавного подъема кресла, терморегулирующая обивка, мягкая обивка.

3

Оптимальный обзор

- **Оптимальное освещение зоны препарирования**
Операционный светильник LEDview Plus и LED-подсветка инструментов.
- **Удобные регулируемые подголовники**
Автоматический подголовник или двухшарнирный подголовник.
- **Прекрасные интраоральные снимки**
Камера SiroCam AF/AF+ с автофокусом.



4

Интегрированный рабочий процесс

- **Интуитивное управление**
Функции имплантологии и эндодонтии, вывод информации апекслокатора на монитор Sivision*.
- **Интегрированные функции**
Пользовательский интерфейс EasyTouch с настройкой функций.
- **Современное оборудование**
Инновационные инструменты, усовершенствованная система коммуникации с пациентом Sivision, USB-интерфейс и интерфейс Ethernet.

Отличные результаты

- Клинические
- Эстетические
- Экономические

* Доступно с Sidexis 4.



Эффективная интеграция

Упростите процесс работы за счет использования встроенной функции имплантологии, понятно отображаемой на сенсорном экране, и предоставьте своим пациентам более удобное лечение.

Простое управление не требует опыта или дополнительного ножного управления. Кроме того, вы сможете сэкономить время благодаря отсутствию необходимости переоснащать оборудование, а также за счет функции быстрой очистки.




Интегрированная имплантология

Благодаря интегрированной функции имплантологии можно задать скорость, значение крутящего момента и расхода стерильной охлаждающей жидкости для каждого этапа работы.



Мотор BL Implant

Тонкий, легкий, бесщеточный имплантологический мотор без выхода воздуха в область препарирования. С внутренней системой охлаждения. Максимальный крутящий момент 5 Н·см.

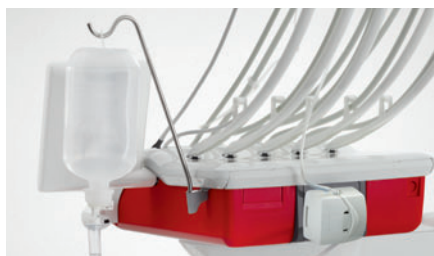

Интегрированный насос для физраствора

Управляется ножной педалью. Поток стерильной охлаждающей жидкости, необходимой для каждого этапа имплантологического лечения, настраивается индивидуально.




Угловой наконечник Implant 20:1

Угловой наконечник 20:1 с крутящим моментом до 70 Н·см обладает необходимой мощностью для фрезерования и сверления. Обеспечивает высокоточные результаты в хирургии и имплантологии.

Работа, эффективная до самых корней

Новая усовершенствованная функция эндодонтии гарантирует повышение уровня вашей работы. Представляем вам обзор абсолютно гигиеничного, эффективного и уверенного рабочего процесса.

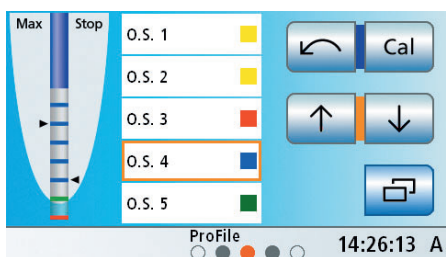

Интегрированная эндодонтия

С интегрированной функцией эндодонтии настольные устройства уходят в прошлое. Использование апекслокатора делает доступным точное управление крутящим моментом, что гарантирует максимальную клиническую безопасность.

Данные апекслокатора на мониторе

Теперь на мониторе можно увидеть расстояние до конца корневого канала и выбранный файл.



Heliodent Plus с креплением на установке

Быстрая и надежная интраоральная рентгеновская съемка. Прочный рентгеновский аппарат обеспечивает максимальную гибкость работы и оптимальное качество изображения.



Угловой наконечник с подсветкой T1 Line Endo 6

Хорошее освещение области препарирования во время эндодонтического лечения повышает успешность всего лечения.



Обновление систем реципрокных файлов

Dentsply Sirona является единственным производителем стоматологических установок, интегрирующим системы реципрокных файлов Dentsply Mailefer и VDW, что позволяет быстро и просто использовать общие файловые системы. Библиотека файлов может быть легко дополнена другими файловыми системами.

WaveOne®

WaveOne® Gold
Reciprocating Files

Reciproc®
One file endo



Эффективность для вашего стиля работы

Sinius поможет вам работать без усталости с отличными клиническими результатами даже в длительные и напряженные дни. Какими бы ни были ваши любимые рабочая позиция, методы работы, физические требования, которые могут быть у вас или ваших пациентов – Sinius обеспечит здоровое движение вам и максимальный комфорт пациентам.



Автоматический подголовник

Автоматически, без усилий и осторожно перемещает голову пациента в желаемое положение.



Инновационная беспроводная педаль ножного управления

Свободно позиционируемая беспроводная педаль размещается максимально удобно для вас.



Перемещение модуля врача

Модуль врача может быть перемещен вручную в нужное положение без особых усилий.



Светильник LEDview Plus

Обеспечивает идеальное сочетание интенсивности света, цвета и размера светового поля. Доступна конфигурация с креплением на потолке и потолочная комбинация LEDview Plus/Heliodent Plus.



Рабочий стул Hugo

Эргономичный рабочий стул Hugo разработан для интуитивного поддержания правильной осанки в течение всего процесса работы.



Sidexis 4

Благодаря Sidexis 4 вы можете показать пациенту рентгеновские, интраоральные снимки и обзор плана лечения на мониторе Sivation.

Sinus оптимизирует рабочие расстояния

Гибкая система расположения врача и ассистента у кресла пациента и положение поддона, независимое от модуля врача.





Точное соответствие интересам ваших пациентов

Благодаря продуманному дизайну и новейшим мультимедийным технологиям Sinius обеспечит пациентам максимальный комфорт. Дополнительное удобство, предоставляемое Sinius, оправдывает себя, особенно во время длительных сеансов лечения. Ваши пациенты будут полностью расслаблены, и вы сможете сосредоточиться на их лечении. С помощью камеры SiroCam AF/AF+ и монитора 22" вы сможете не только поставить точный диагноз, но и поможете своим пациентам его понять и принять обоснованное решение о лечении.



Мягкая обивка

Мягкий, приятный на ощупь материал и удобная набивка для максимального расслабления, профилированная поверхность для идеального положения в кресле.



Ультрасовременное оснащение

Камера SiroCam AF/AF+ с автофокусировкой сочетает в себе потрясающее качество снимков и простоту управления.



Терморегулирующая обивка «Премиум»

Терморегулирующая обивка создает приятный охлаждающий эффект и обеспечивает комфортное состояние пациента в кресле.



Максимально низкое положение кресла пациента

Кресло пациента Sinius опускается до уровня 36 см, что очень удобно для детей, пожилых людей и пациентов с ограниченными физическими возможностями.



Мультимедийные консультации на мониторе 22"

С помощью интерфейса EasyTouch можно демонстрировать рентгеновские и интраоральные снимки, а также обзор плана лечения.



Функция поясничной опоры

Спинка индивидуально регулируется в зависимости от анатомических особенностей пациента для максимально комфортного положения его позвоночника.

Больше эффективности для вашей команды

Sinius позволяет добиваться высоких гигиенических стандартов при минимальных затратах времени. Все в стоматологической установке, начиная с гладких, легко очищаемых поверхностей и заканчивая съемными компонентами и встроенными адаптерами для санитарной обработки, подчинено экономящей время легкой работе с потенциальными источниками загрязнения и их удалению.



Интегрированные санационные адаптеры

Все шланги инструментов подсоединяются к встроенным адаптерам санитарной обработки для промывки и ежемесячной дезинфекции и могут быть промыты потоком воды нажатием одной кнопки.



Эффективная очистка аспирационных шлангов

Все аспирационные шланги могут быть легко и быстро автоматически промыты.



Автоматическая дезинфекция

При желании система очистки аспирационных шлангов может быть оснащена автоматическим дозатором химических веществ из списка обслуживания и дезинфекции Dentsply Sirona.



Съемная чаша плевательницы

Поворотная чаша плевательницы легко снимается и может быть легко очищена.



Термодезинфицируемые элементы

Sinius имеет гладкие, легко чистящиеся поверхности. Съемные элементы можно простерилизовать или продезинфицировать при высокой температуре.



DGKH (Немецкое общество больничной гигиены) подтвердило, что оборудование Dentsply Sirona соответствует самым высоким гигиеническим стандартам безопасности в соответствии с рекомендациями Института Роберта Коха.

Больше информации на сайте www.krankenhaushygiene.de

Дизайн и функциональность

Такие престижные дизайнерские награды, как награда iF communication и Red Dot, свидетельствуют о выдающемся качестве дизайна стоматологических установок Dentsply Sirona. Стоматологическая установка Sinius предусматривает огромный выбор вариантов дизайна и три различные цветовые палитры для вашей клиники. Дайте волю фантазии и создайте свое собственное идеальное сочетание.

Индивидуальная конфигурация

Как, на ваш взгляд, должна выглядеть ваша стоматологическая установка? В нашем приложении вы можете виртуально разместить Sinius в своей клинике, а также выбрать цвет обивки и конфигурацию оборудования.

www.dentsplysirona.com/treatmentcenter-app

Мир элегантности

Классические, неподвластные времени цвета для создания благородной, изысканной атмосферы.

Цвет обивки

Карбон*

Вишня

Платина

Тихий океан*

Цвет лакокрасочного покрытия

Нейтральный белый

Бордо

Платиновое серебро

Полярный синий



Мир природы

Нежные, теплые цвета, создающие спокойную, расслабляющую атмосферу.

Цвет обивки

Базальт*

Мокко*

Вишня

Сапфир

Цвет лакокрасочного покрытия

Платиновое серебро

Бежевый металлик

Сигнальный красный

Полярный синий



Мир жизнелюбия

Яркие, свежие цвета для живой и современной атмосферы.

Цвет обивки

Весна

Закат

Орхидея

Лагуна

Цвет лакокрасочного покрытия

Свежая зелень

Темно-оранжевый

Розовый

Голубая бирюза



* Цвета, доступные для мягкой обивки.

Индивидуальная конфигурация

Вы можете укомплектовать установку по вашему желанию и в дальнейшем добавлять новые опции. Главное – вы платите только за то, что вам действительно нужно.

Базовая комплектация

Sinius

С перемещением модуля врача параллельно креслу пациента



Sinius CS

С верхней подачей инструментов



Sinius TS

С нижней подачей инструментов



Пользовательские пакеты



Start

- Пулстер Sprayvit M на модуле врача
- 1 мотор BL ISO E
- Светильник LEDview Plus



Advance

- Пулстер Sprayvit M на модуле врача
- 1 мотор BL (за доплату BL ISO C)
- Скейлер SiroSonic TL
- Светильник LEDview Plus
- Беспроводная педаль ножного управления



Innovation

- Пулстер Sprayvit M на модуле врача и на модуле ассистента
- 2 мотора BL (за доплату BL ISO C)
- Скейлер SiroSonic TL
- Светильник LEDview Plus
- Беспроводная педаль ножного управления

Функциональное дополнение к базовому оборудованию. Пакеты нельзя комбинировать.

Пакеты опций



Endo

- Функция эндодонтии
- Апекслокатор
- Держатель апекслокатора
- Угловой наконечник с подсветкой T1 Line Endo 6L
- Переходник ISO с подсветкой (опция)
- Апгрейд до мотора BL или BL ISO C (требуется только в сочетании с пакетом Start)
- Опция: система реципрокных файлов



Implant

- Функция имплантологии
- Интегрированный насос для физраствора
- Электромотор BL Implant
- Угловой наконечник Implant 20:1



Comfort

- 1-й рабочий стул (свободный выбор версии)
- 2-й рабочий стул по цене пакетного предложения
- Моторизованный подголовник
- Функция поясничной опоры
- Терморегулирующая обивка «Премиум»
- Доступна мягкая обивка (вместо терморегулирующей обивки «Премиум»)



Sivision

- Монитор 22"
- Свободный выбор варианта размещения монитора
- Камера SiroCam AF или SiroCam AF+ (опционально)
- Блок питания камеры на модуле врача

Все опции пакетов могут свободно комбинироваться друг с другом.

Ваши индивидуальные опции

Индивидуальные дополнительные опции и оборудование, входящее в базовую комплектацию

Базовая комплектация

VB CS TS

Базовая комплектация

VB CS TS

Кресло пациента			
Двухшарнирный подголовник	■	■	■
Автоматический подголовник	□	□	□
Обивка «Премиум»	■	■	■
Терморегулирующая обивка «Премиум»	□	□	□
Мягкая обивка	□	□	□
Функция поясничной опоры	□	□	□
Откидывающийся подлокотник (левый и/или правый)	□	□	□
Педаль перекрестного действия	■	■	■
Педаль ножного управления с кабелем	■	■	■
Беспроводная педаль управления	□	□	□
Разъемы для подключения настольных приборов	□	□	□
Подушка для детей и пациентов небольшого роста	□	□	□
Монтажная плита	□	□	□

Модуль врача			
5 позиций для инструментов. Съемная ручка, съемный держатель инструментов.			
Пустер Sprayvit M со светодиодной подсветкой	□	□	□
1-й привод бора (для микромотора или турбины)	■	■	■
2-й привод бора (для микромотора или турбины)	■	■	■
3-й привод бора (для микромотора или турбины)	□	□	□
Электрический микромотор BL	□	□	□
Электрический микромотор BL ISO C	□	□	□
Электрический микромотор BL ISO E	□	□	□
Электрический микромотор BL Implant	□	□	□
Угловой наконечник Implant 20:1	□	□	□
Турбинный шланг	□	□	□
Ультразвуковой скейлер SiroSonic TL	□	□	□
Управление курсором без помощи рук	■	■	■
Функция имплантологии	□	□	□
Насос для физраствора	□	□	□
Функция эндодонтии	□	□	□
Угловой наконечник с подсветкой T1 Line Endo 6	□	□	□
Система реципрокных файлов	□	□	□
Апекслокатор с выводом информации на монитор Sivision	□	□	□
Поворотный поддон для 1 или 2 стандартных подносов		□	□
Негатоскоп для панорамных снимков			□

Модуль ассистента			
4 позиции для инструментов. Съемный держатель инструментов, силиконовый коврик.			
Полимеризационная лампа Satelec mini LED	□	□	□
Хирургических пылесос	□	□	□
2-й хирургический пылесос	□	□	□
Пустер Sprayvit M со светодиодной подсветкой	□	□	□
Пылесос	■	■	■
Слюноотсос	■	■	■

Гидроблок			
Система постоянной дезинфекции с функцией длительной стерилизации и санации	■	■	■
Очистка аспирационных шлангов	■	■	■
Очистка аспирационных шлангов с использованием химических средств	□	□	□
Система влажной аспирации с клапаном в плевательнице	■	■	■
Автоматический отделитель	□	□	□
Отделитель амальгамы	□	□	□
Поворотная плевательница	■	■	■
Без плевательницы	□	□	□
Поддон со съемным лотком и ручкой	□		

Цифровая система визуализации Sivision			
Интраоральная камера SiroCam AF	□	□	□
Интраоральная камера SiroCam AF+	□	□	□
Монитор 22" на поддоне (поддон в комплекте)	□		
Монитор 22" на стойке светильника	□	□	□
Дополнительный держатель для камеры	□		□
Блок питания для камеры на модуле врача	□	□	□
Блок питания для камеры на модуле ассистента		□	□
Комплект Sivision ready с USB-интерфейсом	□	□	□
Комплект кабелей для подключения к ПК	□	□	□

Рабочий стул Hugo			
На выбор длинная или короткая газовая пружина.			
Hugo Freehand (ножная регулировка высоты)	□	□	□
Hugo Manual (ручная регулировка высоты сиденья)	□	□	□
Hugo Manual Plus (ручная регулировка высоты, опорное кольцо)	□	□	□

Рабочий стул Carl			
На выбор длинная или короткая газовая пружина.			
Carl Manual (ручная регулировка высоты сиденья)	□	□	□
Carl Manual Plus (ручная регулировка высоты, опорное кольцо)	□	□	□

Операционный светильник			
Операционный светильник LEDview (с тремя степенями свободы, с бесконтактным сенсором)	□	□	□
LEDview Plus с креплением на потолок	□	□	□
LEDview Plus/Heliodont Plus с креплением на потолок	□	□	□
Адаптер для размещения Heliodont Plus на установке	□	□	□

VB Sinius с параллельным перемещением модуля врача. ■ Входит в базовую комплектацию.
 CS Sinius CS (с верхней подачей инструментов). □ Опция.
 TS Sinius TS (с нижней подачей инструментов).



Рабочий стул Hugo Freehand



Рабочий стул Hugo Manual



Монитор 22" на поддоне

Монитор 22" на стойке
светильникаВстроенный насос
для физраствора


Heliodent Plus



Подлокотники



Хирургический пылесос

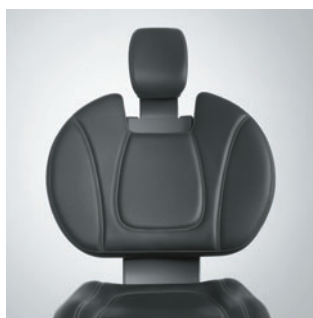

Мягкая обивка

Подушка для детей и пациен-
тов небольшого ростаРазъемы для подключения
настольных приборовUSB-интерфейс
на модуле врачаКамера SiroCam AF в допол-
нительном держателеПолимеризационная лампа
Satelec mini LED

Рабочий стул Carl Manual



Рабочий стул Carl Manual Plus

Дополнительный поддон
для модуля ассистентаПоворотный поддон
для Sinius TSПоворотный поддон
для Sinius CSПоддон Sirona
для Sinius

Dentsply Sirona

115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
«Немецкий центр промышленности
и торговли», офис 10-04

Телефон +7 (495) 725-10-87

Факс +7 (495) 725-10-86

www.dentsplysirona.com | www.sirona.ru

Процедурные решения

Профилактика

Реставрация

Ортодонтия

Эндодонтия

Имплантология

Протезирование

Технологические платформы

CAD/CAM

Рентгеновские системы

Стоматологические установки

Инструменты