

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Intego и Intego Pro

Качество, на которое
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

www.dentsplysirona.com/ru-ru





Ваш надежный партнер

Семейство стоматологических установок Intego и Intego Pro – лучшее в своем классе. Они опираются на мощь инноваций и превосходный, отмеченный наградами дизайн. Как надежный партнер любой эффективной клиники, Intego и Intego Pro обладают всеми качествами, гарантирующими оптимальный рабочий процесс: эргономичным дизайном, превосходным лечебным процессом и отличным соотношением цены и качества. Благодаря всему этому Intego и Intego Pro являются эталоном высочайшего уровня надежности.

Отличное соотношение цены и качества

Отличная производительность, инновационные функции и индивидуальные опции по отличной цене.

Эргономичный дизайн

Интуитивное управление и оптимизированный интегрированный рабочий процесс.

Сделано в Германии

Постоянный контроль качества и долговечные материалы – это ваши надежные инвестиции в будущее.

Выбор за вами

Один размер подходит всем – мы знаем, что в стоматологической клинике очень часто это не так. Вот почему Intego выпускается в двух версиях, соответствующих вашим индивидуальным требованиям.

Intego

Если вам нужна стоматологическая установка для оптимальной поддержки индивидуальных методов работы по разумной цене, Intego – ваш выбор. Несмотря на простоту управления, все соответствующие функции находятся именно там, где они вам

нужны. Эргономичный дизайн обеспечивает высокий уровень комфорта как для вас, так и для ваших пациентов. Гидроблок «Компакт» с бутылкой для чистой воды позволяет легко соблюдать все гигиенические требования.



Intego Pro

Отличительной чертой Intego Pro, несомненно, является гидроблок «Комфорт», который внедрит в вашу клинику комплексную концепцию гигиены. Встроенная система дезинфекции снижает рабочую нагрузку

персонала благодаря автоматической очистке и дезинфекции водопроводных линий, а также постоянной дезинфекции с помощью Dentosept S.



Intego TS с нижней подачей инструментов

- Эргономичное расположение модуля врача благодаря широкому диапазону положений кронштейна.
- Гибкое позиционирование функционального съемного поддона.



Качество, на которое можно положиться

Ваш рабочий день непрост и предъявляет множество требований к выбранной вами установке. Стоматологические установки Intego и Intego Pro предлагают вам выбор из двух версий, каждую из которых вы сможете сконфигурировать по своему вкусу. Что бы вы ни выбрали – Intego или Intego Pro, верхнюю или нижнюю подачу инструментов – вы получите оптимальную эффективность по привлекательной цене.

CS – верхняя подача инструментов



- Идеально подходит для самого широкого спектра клинических случаев при лечении в две или четыре руки.
- Оптимальное позиционирование – может поворачиваться до 240°.
- Максимальное расстояние между модулем врача и инструментами составляет 90 см.

- 1 Sprayvit E**
Оптимальный обзор благодаря светодиодной подсветке.
- 2 Мотор BL ISO E**
Стерилизуемый бесщеточный мотор с управлением скоростью и крутящим моментом. Невероятно легкий, компактный, с широким диапазоном скоростей.
- 3 Скейлер SiroSonic L**
Стерилизуемые наконечник и насадки. Контролируемая и направленная осцилляция. Электронное управление мощностью и подачей воды.
- 4 SiroCam F, AF или AF+**
Готовые к работе камеры для получения детализированных изображений. Искключительно просты в работе. Камера Sirocam AF/AF+ с автофокусом.



Интуитивное управление

Сложные лечебные процедуры требуют полной концентрации. Именно поэтому стоматологические установки Intego и Intego Pro интуитивны и оборудованы современными интерфейсами и инновационными инструментами, делающими процесс лечения простым и понятным.

Вы сможете сконцентрироваться только на том, что на самом деле важно – на вашем пациенте и на достижении безупречного результата.

Современные интуитивные интерфейсы



EasyPad

Понятный и интуитивный пользовательский интерфейс – стандарт для Intego и Intego Pro. Доступна базовая функция эндодонтии.



EasyTouch

Пользовательский интерфейс может быть дополнительно интегрирован в стоматологическую установку. Интуитивная сенсорная панель, больше опций, больше комфорта. Необходим для расширенной функции эндодонтии.


Возможности интеграции для проведения эндодонтического лечения

Встроенная в Intego функция эндодонтии – это идеальное решение для более безопасного, эффективного и легкого эндодонтического лечения. Интеграция всех необходимых функций обеспечивает упрощенный и абсолютно гигиеничный рабочий процесс и сводит к минимуму время настройки.



Апекслокатор

Апекслокатор может быть интегрирован в EasyTouch, что позволит постоянно контролировать глубину обработки во время эндодонтического лечения и снизить дозу излучения при рентгеновской съемке.

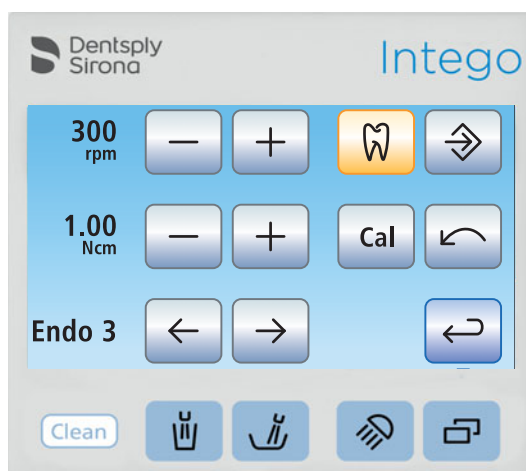


Регулировка крутящего момента

Регулировка скорости и крутящего момента. Мотор останавливается при достижении заданного максимального значения крутящего момента, что гарантирует высокий уровень безопасности эндодонтического лечения.



Heliodent Plus с креплением на установке

Быстрая и надежная интраоральная рентгеновская съемка. Надежный рентгеновский аппарат обеспечивает максимальную гибкость работы и оптимальное качество изображения.

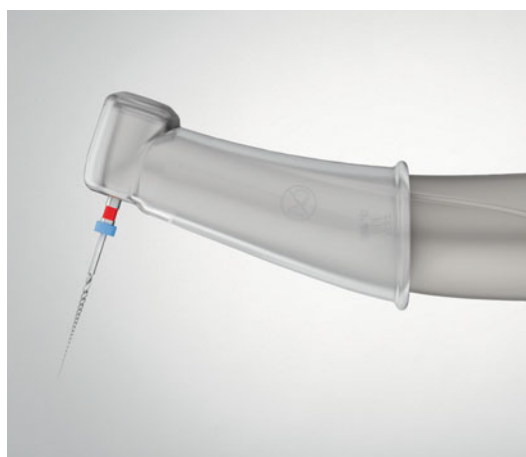

Угловой наконечник с подсветкой T1 Line Endo 6 L

Хорошее освещение области препарирования во время эндодонтического лечения повышает успешность всего лечения. Доступен вариант без подсветки – угловой наконечник Endo 6:1.

Обновление систем реципрокных файлов

В стоматологические установки семейства Intego интегрированы системы реципрокных файлов Dentsply Sirona Mailefer и VDW. Это позволяет быстро и просто использовать общие файловые системы.

WaveOne®

WaveOne® Gold
Reciprocating Files

Reciproc®
One file endo



Впечатляющий комфорт пациента

Ваши пациенты оценят уровень комфорта: кресло пациента стоматологических установок Intego и Intego Pro обладает эргономичным дизайном и вместе с подголовником обеспечивает непревзойденный комфорт вашим пациентам. Кресло опускается достаточно низко, чтобы им могли воспользоваться даже пациенты невысокого роста. И несомненно, комфорт при лечении дает пациентам ощущение безопасности и повышает их лояльность к вашей клинике.



Двухшарнирный подголовник

Быстро регулируется для разных ситуаций, возникающих при лечении, а также под пациентов с различным телосложением.

Обивка «Премиум» и мягкая обивка


Высококачественная обивка обеспечивает комфорт даже при длительном лечении.

ErgoMotion

Наклон спинки соответствует движениям позвоночника пациента, что предотвращает эффекты растяжения и сжатия.

Подлокотники

Ваши пациенты могут удобно облокотиться.



ErgoMotion от Dentsply Sirona – уникальная функция для семейства Intego

Ваши преимущества

- Улучшенное позиционирование для лечения верхней или нижней челюсти.
- Пациент во время лечения не напрягает голову.
- Позвоночник пациента не растягивается и не сжимается.
- Повторная настройка подголовника не требуется.

Система подъема кресла

Уникальный подъемный механизм кресла плавно перемещает пациентов в нужное положение.

Опора для ног Vario

Поставляется в комплекте с обивкой «Премиум». Может быть легко удлинена, что обеспечивает удобство даже для очень высоких пациентов.

Intego – гигиена, на которую МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Стоматологи всего мира предъявляют высокие требования к безопасности своих пациентов и коллектива. Концепция гигиены Intego разработана для легкого и быстрого выполнения всех гигиенических требований. Конструкция модуля ассистента и гидроблока позволяет проводить все профилактические процедуры легко и просто.

Intego
с гидроблоком
«Компакт»

Плевательница

Съемная, поворотная, легко моющаяся, с простым доступом

Функция промывки

Автоматическая очистка всех шлангов на модулях врача и ассистента.





Системы аспирации

Совместимы со всеми стандартными системами влажной и сухой аспирации, включая отделитель амальгамы.

Intego

Гидроблок и модуль ассистента «Компакт» могут быть адаптированы к большинству требований благодаря свободному выбору системы аспирации и гигиеническим опциям.



Бутылка с чистой водой

Для дозированной подачи воды. Может быть наполнена раствором Dentosept S для постоянной дезинфекции и ручной санации.



Автоматическая очистка аспирационных шлангов

Адаптеры для автоматической очистки слюноотсоса и пылесоса.



Гладкие поверхности

Гладкие поверхности без зазоров для максимального контроля загрязнения и очистки установки в кратчайшие сроки.

Intego Pro – гигиена, на которую МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Стоматологи всего мира предъявляют высокие требования к безопасности своих пациентов и коллектива. Концепция гигиены Intego Pro разработана для легкого и быстрого выполнения всех гигиенических требований. Конструкция модуля ассистента и гидроблока позволяет проводить все профилактические процедуры легко и просто.

Intego Pro
с гидроблоком
«Комфорт»

Плевательница

Съемная, поворотная,
изготовленная из высоко-
качественного стекла.



Функция промывки и автопромывки

Быстрая или интенсивная (необходимы адаптеры) очистка шлангов для инструментов.

Системы аспирации

Совместимы со всеми стандартными системами влажной и сухой аспирации, включая отделитель амальгамы.

Intego Pro

Разработка гидроблока и модуля ассистента «Комфорт» была основана на всеобъемлющей концепции гигиены.



Встроенная система дезинфекции

Функция автоматической санации для регулярной интенсивной дезинфекции раствором Dentosept S. Может использоваться как система автономной подачи воды.



Встроенные адаптеры для санитарной обработки

Для автоматической промывки и санации водных каналов.



Химическая очистка аспирационных шлангов

Емкость с чистящим средством для химической очистки аспирационных каналов.

Идеальное эргономичное положение для любого лечения

Достигайте совершенных результатов даже в конце рабочего дня, используя свои знания и нашу установку. Независимо от того, работаете вы левой или правой рукой, вы ощутите все преимущества интуитивного рабочего положения, удобного позиционирования пациента, оптимального обзора и интегрированных рабочих процессов. Все это станет залогом идеальных клинических результатов.



Больше свободы движений

- Больше пространства для ног под креслом пациента за счет тонкой спинки.
- Свобода перемещения педали ножного управления.
 - Гибкая настройка высоты кресла с помощью модуля врача или опционального ножного переключателя.
 - Поворотная плевательница.

Оптимизированное расположение инструментов

- Отличная координация модулей врача и ассистента.
- Гибкое позиционирование дополнительного поддона для увеличения пространства.
 - Модули ассистента «Компакт» и «Комфорт», соответствующие вашей концепции лечения.



Комфортные рабочие стулья

- Hugo, Carl, Paul
- Новинка: стул Theo с седловидным сиденьем для удобства при лечении нижней челюсти
- Поддержка здорового сидячего положения в течение всего дня.

Оптимальный обзор

- Двухшарнирный подголовник для быстрой и гибкой регулировки.
- Плоский подголовник, регулируемый благодаря магнитной подушке.
- Операционный светильник LEDview Plus и LED-подсветка инструментов.

Дизайн и функциональность

Такие престижные дизайнерские награды, как награды iF communication и Red Dot, свидетельствуют о выдающемся качестве дизайна стоматологических установок Dentsply Sirona. Стоматологические установки Intego предусматривают огромный выбор вариантов дизайна и три различные цветовые палитры для вашей клиники. Дайте волю фантазии и создайте свое собственное идеальное сочетание.



Цвета обивки

Мир элегантности



Классические, неподвластные времени цвета для создания по-настоящему изысканной атмосферы.

Мир природы



Мягкие, теплые оттенки для успокаивающей атмосферы лечения.


Мир жизнелюбия



Свежие цвета и светлые тона для современной, живой атмосферы.

*Цвета, доступные для мягкой обивки.

Цвета прошивки

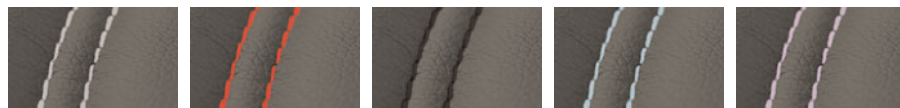

Стандартный

Красный

Темно-серый

Светло-голубой

Розовый

Варианты обивки



Обивка «Премиум»

Высококачественная бесшовная обивка обеспечивает комфорт пациента даже при длительном лечении.



Мягкая обивка

Мягкий, приятный на ощупь материал и комфортная набивка помогут пациентам максимально расслабиться, а профилированная поверхность – принять идеальное положение.

Надежные инвестиции в будущее

В хорошо организованной клинике правильно подобранные опции для стоматологической установки добавляют комфорта. Поэтому для оптимизации рабочего процесса вы можете подобрать установку из семейства Intego под ваши требования. Но для нас понятие «надежные инвестиции» значит еще больше – вы можете оснастить свою установку Intego или Intego Pro опциями и интерфейсами, которые позволят в будущем быстро и легко интегрировать новые функции.

Многообразие моделей

Выбор из двух подголовников

Плоский подголовник быстро и эффективно регулируется. В качестве опции можно выбрать легко позиционируемый двухшарнирный подголовник, обеспечивающий оптимальную видимость даже для труднодоступных мест.



Плоский подголовник



Двухшарнирный подголовник

Операционный светильник – всегда оптимальное освещение

Операционный светильник премиум-класса LEDview Plus с полихромными светодиодами и совершенными техническими данными обеспечивает безупречную естественность освещения.



LEDview Plus

Модуль ассистента: «Компакт» или «Комфорт»

Оба варианта модуля ассистента занимают очень мало места и гарантируют максимум свободы движения. С моделью «Комфорт» вам будет удобно работать даже без ассистента.



Модуль ассистента «Компакт»



Модуль ассистента «Комфорт»

Ультрасовременное оснащение

Камера SiroCam F/AF/AF+ с автофокусировкой сочетает в себе потрясающее качество снимков и простоту управления.



	SiroCam F	SiroCam AF	SiroCam AF+
Фокусировка	Фиксированная	Автоматическая	Автоматическая
Формат 16:10	✓	✓	✓
Разрешение матрицы, мП	0,42	0,65	1,00
Рабочая область, мм	✓ 5–20	✓ 2–130	✓ 2–130
Видеоразрешение	824 × 514	824 × 514	824 × 514
Фоторазрешение	824 × 514	1024 × 640	1276 × 796

Дизайн, ориентированный на будущее

Интерфейсы: настройка для будущих функций

Сетевой интерфейс в кресле пациента и USB-порт в модуле врача или ассистента позволяют интегрировать новейшие функции и подключать установки к сети клиники, при этом поиск и устранение неисправностей станет намного проще.

Монитор Sivision 22"

При помощи этого монитора вы сможете комментировать изображения полости рта и рентгеновские снимки пациентам, работать с ПО, планировать лечение, просматривать видео и презентации непосредственно на стоматологической установке.



Интегрированный USB-интерфейс



Монитор Sivision 22"

Качество, на которое МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Мы не просто стремимся радовать наших клиентов, мы хотим произвести на них впечатление. Именно поэтому качество, производительность и высокий уровень сервиса являются для нас ключевыми факторами. Стоматологические установки компании Dentsply Sirona сочетают в себе высокое качество и инновации, ощутимо повышающие комфорт и оптимизацию рабочего процесса.

Надежность и долговечность



Точные и продуманные тесты качества и проверенные материалы делают Intego и Intego Pro надежными стоматологическими установками с большим сроком службы.

Высокое качество



Стоматологические установки Intego и Intego Pro сразу же демонстрируют наше внимание к деталям. Используемые материалы – прочные, гибкие пластмассы, твердая сталь и алюминиевые компоненты изнутри, высококачественное стекло и обивка – все отвечает требованиям качества для продуктов премиум-класса.

Высокие стандарты



Dentsply Sirona – технологический лидер с более чем 130-летней историей инноваций. Наши инженеры отдела исследований и разработок уделяют пристальное внимание не только инновациям, но и качеству.



Дизайн будущего

В инновационном центре Dentsply Sirona специалисты предвидят будущие тренды, поэтому разрабатывают продукцию в соответствии с технологическими требованиями будущего.



Индивидуальная конфигурация

Intego

Базовая комплектация

Кресло пациента

- Обивка «Премиум»
- Пневматическая педаль ножного управления
- Плоский подголовник

Модуль врача

- 5 позиций для инструментов
- Пользовательский интерфейс EasyPad
- Комплект для 2 приводов бора

Модуль ассистента

- Вариант «Компакт» с поворотным держателем на гидроблоке
- 4 позиции для инструментов
- Слюноотсос и пылесос

Гидроблок

- Стандартная влажная аспирация
- Возможность автономной подачи воды (бутылка)
- Ручная поворотная плевательница

Версия

TS с нижней подачей инструментов



CS с верхней подачей инструментов



Пользовательские пакеты

Start

- 3-канальный пюстер «вода-воздух»
- Подсветка для инструментов на модуле врача
- 2 турбинных шланга
- Светильник LEDview Plus*

Advance

- Электрическая педаль C+
- Пюстер Sprayvit E на модуле врача
- Подсветка для инструментов на модуле врача
- 1 турбинный шланг
- 1 микроmotor BL ISO E с питающей электроникой
- Светильник LEDview Plus*

Innovation

- Электрическая педаль C+
- Пюстер Sprayvit E на модуле врача
- Подсветка для инструментов на модуле врача
- 1 турбинный шланг
- 1 микроmotor BL ISO E с питающей электроникой
- Скейлер Sirosonic L
- Светильник LEDview Plus

Пакеты опций

Sivision Ready

- USB-интерфейс на модуле врача или ассистента
- Сетевой интерфейс

Sivision Start с монитором/без монитора

- USB-интерфейс на модуле врача или ассистента
- Сетевой интерфейс
- Камера SiroCam F (SiroCam AF/AF+ за дополнительную плату)
- Держатель монитора на стойке светильника
- Опция: монитор 22"

Ergo

- Система ErgoMotion
- Система подъема кресла (до 185 кг)
- 2 подлокотника
- Двухшарнирный подголовник

Endo Pro**

- Функция контроля крутящего момента
- Апекслокатор
- Угловой наконечник Endo 6:1
- Регулировка скорости e-Control

* Светильник LEDview Plus за дополнительную плату.

** Только с интерфейсом EasyTouch.

Intego Pro

Базовая комплектация

Кресло пациента

- Обивка «Премиум»
- Пневматическая педаль ножного управления
- Плоский подголовник
- Педаль перекрестного действия

Модуль врача

- 5 позиций для инструментов
- Пользовательский интерфейс EasyPad
- Комплект для 2 приводов бора
- Подсветка для инструментов
- Интеграция до 2 электромоторов и скейлера

Модуль ассистента

- Вариант «Комфорт» на кронштейне с широким диапазоном поворота
- 4 позиции для инструментов
- Слюноотсос и пылесос
- Подсветка для пюстера Sprayvit E

Гидроблок

- Возможность подключения автоматической системы дезинфекции
- Переходники для промывки
- Ручная поворотная плевательница
- Влажная аспирация с клапаном выбора места
- Переходники для очистки аспирационных шлангов
- Нагреватель воды

Версия

TS с нижней подачей инструментов



CS с верхней подачей инструментов



Пользовательские пакеты

Start Pro

- Электрическая педаль C+
- Пюстер Sprayvit E на модуле врача
- 1 турбинный шланг
- 1 микромотор BL ISO E
- Светильник LEDview Plus*

Advance Pro

- Электрическая педаль C+
- Пюстер Sprayvit E на модуле врача
- 1 турбинный шланг
- 1 микромотор BL ISO E
- Скейлер Sirosonic L
- Интерфейс EasyTouch
- Светильник LEDview Plus

Innovation Pro

- Электрическая педаль C+
- Пюстер Sprayvit E на модуле врача
- 3-й привод бора
- 1 турбинный шланг
- 2 микромотора BL ISO E
- Скейлер Sirosonic L
- Интерфейс EasyTouch
- Пюстер Sprayvit E на модуле ассистента
- Светильник LEDview Plus

Пакеты опций

Sivision Ready

- USB-интерфейс на модуле врача или ассистента
- Сетевой интерфейс

Sivision Start с монитором/без монитора

- USB-интерфейс на модуле врача или ассистента
- Сетевой интерфейс
- Камера SiroCam F (SiroCam AF/AF+ за дополнительную плату)
- Держатель монитора на стойке светильника
- Опция: монитор 22"

Endo Pro**

- Функция контроля крутящего момента
- Апекслокатор
- Угловой наконечник Endo 6:1
- Регулировка скорости e-Control

* Светильник LEDview Plus за дополнительную плату.

** Только с интерфейсом EasyTouch.

Ваши индивидуальные опции

Индивидуальные дополнительные опции и оборудование, входящее в базовую комплектацию

Intego

Кресло пациента	
Функция памяти 4 положений кресла	■
Центральная распределительная коробка	■
Подъемная система кресла 140 кг	■
Подъемная система кресла 185 кг	□Er
Плоский подголовник	■
Двухшарнирный подголовник	□Er
Обивка «Премиум»	■
Комфортная обивка	□
ErgoMotion	□Er
Ножная педаль перекрестного действия	□
Подушка для детей и пациентов небольшого роста	□
Правый подлокотник	□Er
Левый подлокотник	□Er
Разъемы клапанов для подключения внешних устройств	□
Набор для снижения давления	□
Набор для установки крышки	□
Отдельная распределительная коробка	□
Монтажная плита	□

Модуль врача	
Регулируемый по высоте кронштейн с пневм. тормозом	■
5 позиций инструментов	■
Дополнительный держатель для камеры (TS)	□
Комплект 2 приводов бора (без оптоволоконка)	■
Пневматическая педаль ножного управления	■
Электрическая педаль ножного управления C+	□A, I
Интерфейс EasyPad (2 пользователя)	■
Интерфейс EasyTouch (4 пользователя)	□T
Пустер Sprayvit E с подсветкой	□A, I
Пустер Sprayvit E с подсветкой (вода слева)	□A, I
3-канальный пустер «вода-воздух»	□S
Турбинный шланг с подсветкой	□Sx2, A, I
Турбинный шланг Borden	□
1-й микромотор BL ISO E со шлангом	□A, I
2-й микромотор BL ISO E со шлангом	□
Ультразвуковой скейлер Sirosonic L	□I
3-й привод бора	□
Подсветка для турбины и Sprayvit E	□S, A, I
Функция контроля крутящего момента	□E
eControl: диапазон скорости 100-40 000 об/мин	□E
Апекслокатор	□E
Угловой наконечник Endo 6:1	□E
Негатоскоп (для панорамных снимков)	□
Функции промывки и ручной санации	□
Поворотный держатель 2 стандартных поддонов (TS)	—
Дополнительный держатель 2 стандартных поддонов (TS)	□
Силиконовый коврик для модуля врача (TS)	□
Держатель стандартного поддона (CS)	□
Держатель 2 стандартных поддонов (TS/CS)	□
Силиконовый коврик для модуля врача (CS)	□
Съемные силиконовые чехлы для ручек	□

Модуль ассистента	
Вариант «Компакт» с поворотным держателем на гидроблоке	■
Вариант «Комфорт» на кронштейне с широким диапазоном поворота	□
4 позиции для инструментов	■
Слюноотсос и пылесос	■
Пустер Sprayvit E с подсветкой	□
Пустер Sprayvit E с подсветкой (вода слева)	□
3-канальный пустер «вода-воздух»	□
2-й пылесос	□
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED	□
Панель управления	□
Подсветка для Sprayvit E	□
Силиконовый коврик для варианта «Комфорт»	□

Гидроблок	
С подключением бутылки для чистой воды	■
Ручная поворотная плевательница	■
Белая чаша плевательницы	■
Гидроблок без плевательницы	□
Стандартная влажная аспирация	■
Автоматическая влажная аспирация	□
Клапан выбора места	□
Клапан плевательницы для влажной аспирации	□
Автоматический отделитель	□
Отделитель амальгамы	□
Бутылка для чистой воды без переключателя	□
Бутылка для чистой воды с переключателем	□
Нагреватель воды	□
Система промывки аспирационных шлангов	□

Операционный светильник/Heliodont Plus	
LEDview Plus	□I
LEDview Plus с креплением на потолке	□
LEDview Plus/Heliodont Plus с креплением на потолке	□
Heliodont Plus с креплением на установке	□

Система коммуникации с пациентом	
USB-интерфейс на модуле врача/ассистента	□SiR, SiS
SiroCam F	□SiS
SiroCam AF	□
SiroCam AF+	□
Крепление монитора на стойке светильника	□SiS
Монитор 22" с интегрированным блоком питания*	□SiS*
Сетевой интерфейс	□SiR, SiS

■ Входит в базовую комплектацию.
 □ Опция.
 — Отсутствует/неприменимо.
 SiR Пакет Sivision Ready.
 SiS Пакет Sivision Start.
 SiS* Пакет Sivision Start с монитором.

S Пакет Start Pro.
 A Пакет Advance Pro.
 I Пакет Innovation Pro.
 E Пакет Endo Pro.
 Er Пакет Ergo.

Доступность опций и функций варьируется в зависимости от страны.

Intego Pro

Кресло пациента	
Функция памяти 4 положений кресла	■
Центральная распределительная коробка	■
Подъемная система кресла 185 кг	■
Плоский подголовник	■
Двухшарнирный подголовник	□
Обивка «Премиум»	■
Комфортная обивка	□
ErgoMotion	□
Ножная педаль перекрестного действия	■
Подушка для детей и пациентов небольшого роста	□
Правый подлокотник	□
Левый подлокотник	□
Разъемы клапанов для подключения внешних устройств	□
Набор для снижения давления	□
Набор для установки крышки	□
Отдельная распределительная коробка	□
Монтажная плита	□

Модуль врача	
Регулируемый по высоте кронштейн с пневм. тормозом	■
5 позиций инструментов	■
Дополнительный держатель для камеры (TS)	□
Поворотный держатель для камеры (TS)	–
Комплект 2 приводов бора (без оптоволокон)	■
Пневматическая педаль ножного управления	■
Электрическая педаль ножного управления C+	□ S, A, I
Интерфейс EasyPad (2 пользователя)	■
Интерфейс EasyTouch (4 пользователя)	□ A, I
Пустер Sprayvit E с подсветкой	□ S, A, I
Пустер Sprayvit E с подсветкой (вода слева)	□ S, A, I
Турбинный шланг с подсветкой	□ S, A, I
1-й микромотор BL ISO E со шлангом	□ S, A, I
2-й микромотор BL ISO E со шлангом	□ I
Ультразвуковой скейлер Sirosonic L	□ A, I
3-й привод бора	□ I
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED	□
Подсветка для турбины и Sprayvit E	■
Функция контроля крутящего момента	□ E
eControl: диапазон скорости 100–40 000 об/мин	□ E
Апекслокатор	□ E
Угловой наконечник Endo 6:1	□ E
Негатоскоп (для панорамных снимков)	□
Функции промывки и ручной санации	■
Поворотный держатель 2 стандартных поддонов (TS)	–
Дополнительный держатель 2 стандартных поддонов (TS)	□
Силиконовый коврик для модуля врача (TS)	□
Держатель стандартного поддона (CS)	□
Держатель 2 стандартных поддонов (TS/CS)	□
Силиконовый коврик для модуля врача (CS)	□
Съемные силиконовые чехлы для ручек	□

Assistant element	
Вариант «Компакт» с поворотным держателем на гидроблоке	–
Вариант «Комфорт» на кронштейне с широким диапазоном поворота	■
4 позиции для инструментов	■
Слюноотсос и пылесос	■
Пустер Sprayvit E с подсветкой	□ I
Пустер Sprayvit E с подсветкой (вода слева)	□ I
2-й пылесос	□
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED	□
Панель управления	□
Подсветка для Sprayvit E	■
Силиконовый коврик для варианта «Комфорт»	□

Гидроблок	
Интегрированная система дезинфекции	■
Ручная поворотная плевательница	■
Белая чаша плевательницы	■
Стеклопанель чаша плевательницы	□
Гидроблок без плевательницы	□
Клапан выбора места	■
Клапан плевательницы для влажной аспирации	□
Автоматический отделитель	□
Отделитель амальгамы	□
Система постоянной дезинфекции с функцией длительной стерилизации и санации	□
Нагреватель воды	■
Система промывки аспирационных шлангов	■
Очистка аспирационных шлангов с использованием химических средств	□

Операционный светильник/Heliodont Plus	
LEDview Plus	□ I, T
LEDview Plus с креплением на потолке	□
LEDview Plus/Heliodont Plus с креплением на потолке	□
Heliodont Plus с креплением на установке	□

Система коммуникации с пациентом	
USB-интерфейс на модуле врача/ассистента	□ SiR, SiS
SiroCam F	□ SiS
SiroCam AF	□
SiroCam AF+	□
Крепление монитора на стойке светильника	□ SiS
Монитор 22" с интегрированным блоком питания*	□ SiS*
Сетевой интерфейс	□ SiR, SiS

■ Входит в базовую комплектацию.
□ Опция.
– Отсутствует/неприменимо.
SiR – Пакет Sivation Ready.
SiS – Пакет Sivation Start.
SiS* – Пакет Sivation Start с монитором.

S – Пакет Start Pro.
A – Пакет Advance Pro.
I – Пакет Innovation Pro.
E – Пакет Endo Pro.

Вы сами решаете, что вам необходимо

Это обзор многочисленных опций, доступных для Intego и Intego Pro.
Ваша стоматологическая установка – это ваш выбор.



Рабочий стул Hugo



Рабочий стул Carl



Рабочий стул Paul



Рабочий стул Theo



Дополнительный большой поддон
(модуль врача CS)



Дополнительный поворотный поддон
(модуль врача TS)



Двухшарнирный подголовник



Плоский подголовник



Дополнительный держатель для камеры
(модуль врача TS)



Негатоскоп для панорамных снимков



Модуль ассистента «Комфорт»



Модуль ассистента «Компакт»

Доступность опций и функций варьируется в зависимости от страны.



Электрическая педаль
ножного управления С+



Операционный светильник LEDview Plus



Разъемы для подключения
внешних устройств



Heliodont Plus с креплением на установке



Монитор 22"



Камера SiroCam F



Камера SiroCam AF



Камера SiroCam AF+



Полимеризационная лампа Satelec Mini LED



Intego и Intego Pro без плевательницы



Ножная педаль перекрестного действия

Доступность опций и функций варьируется в зависимости от страны.

Dentsply Sirona

115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
«Немецкий центр промышленности
и торговли», офис 10-04

Телефон +7 (495) 725-10-87
Факс +7 (495) 725-10-86

www.dentsplysirona.com/ru-ru

Процедурные решения

Профилактика
Реставрация
Ортодонтия
Эндодонтия
Имплантология
Протезирование

Технологические платформы

CAD/CAM
Рентгеновские системы
Стоматологические установки
Инструменты